


Сосуд MVE 1536PD Dry Shipper

Сосуд MVE 1536PD Dry Shipper разработан специально для гарантированно безопасной транспортировки или перемещения биообразцов.



Отличительные характеристики:

- Абсорбирующий слой можно заправить жидким азотом для перевозки биообразцов в сухой фазе
- При полной заправке время хранения составляет до 20 суток
- Жесткая стальная рама позволяет перемещать сосуд с помощью подъемной транспортной платформы или вилочного погрузчика
- Размеры сосуда подходят для транспортировки в широкофюзеляжном самолете
- Платформа с системой хранения блокируется для предохранения от поворота при транспортировке
- Запирающаяся крышка
- Регистратор данных позволяет контролировать температуру образцов во время транспортировки
- Внутренний сосуд после использования необходимо дезинфицировать

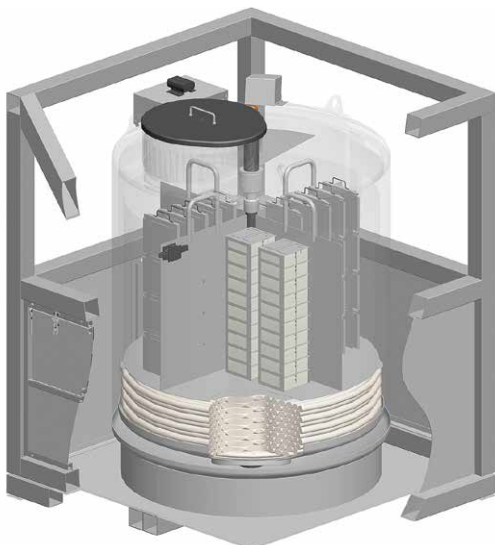

MVE 1536PD	
Максимальный объем хранения	
Криопробирки 1,2 и 2 мл с внутренней резьбой	36 400
Количество стеллажей для криобоксов на 100 ячеек	24
Количество стеллажей для криобоксов на 25 ячеек	16
Количество полок на стеллаж	13
Эксплуатационные характеристики	
Количество абсорбируемого LN ₂ , л, расчетн.	320
Размеры сосуда	
Внутренний диаметр горловины, мм	444
Полезная внутренняя высота, мм	762
Диаметр внутреннего сосуда, мм	978
Общая высота включая раму**, мм	1625
Высота подъема стеллажа для установки в сосуд, мм	1070
Высота подставки, мм	521
Глубина откидной ступеньки, мм	274
Площадь по полу, мм	1321x1321
Вес пустого сосуда*, кг	726
Вес заполненного сосуда*, кг, расчетн.	927

* Без системы хранения | **Обратитесь в тех. поддержку для получения подробных чертежей.

Соответствует MDD 93/42/ЕЕС, Директиве по медицинскому оборудованию для ЕС. Сосуды внесены в перечень UL/C-UL.

Гарантия на запчасти 2 года • Гарантия на вакуумную систему 3 года

Дополнительные элементы



Запирающийся ящик



Регистратор данных



Вид сверху



Лоток

ГРАФИК ТЕМПЕРАТУРЫ*


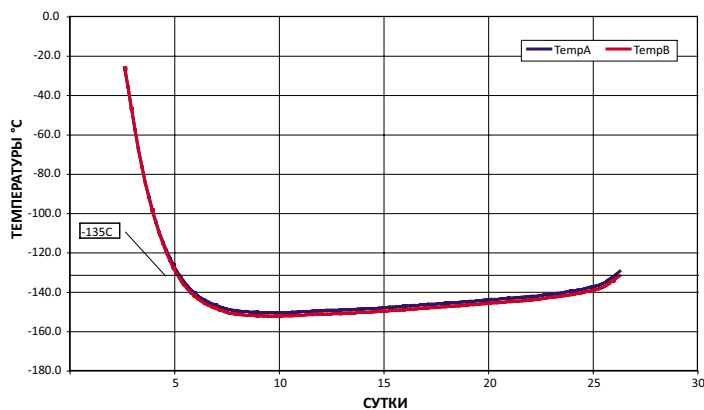


График температуры

*График температуры иллюстрирует типичный режим работы криососуда MVE 1536PD с полной загрузкой и рекомендованными заводскими настройками. Фактические характеристики могут варьироваться в зависимости от атмосферных факторов и условий эксплуатации.

Размещение стеллажей

Размещение квадратных стеллажей

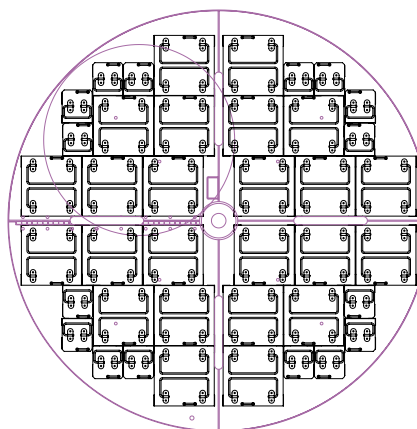

Больше информации на сайте www.mvebio.com и www.cryotec.ru

MVE Biological Solutions оставляет за собой право прекратить производство продукции или изменить цены, материалы, оборудование, качество, описание, спецификацию или процесс изготовления продукции в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо дополнительных обязательств или последствий. Все права, прямо не указанные в данном документе, сохраняются за нами вне зависимости от обстоятельств.

©2020 MVE Biological Solutions



Дистрибьютор в России: ООО «Криотек», 121596 г. Москва
ул. Горбунова д.2 стр.3, БЦ «Гранд Сетунь Плаза»
тел. +7 495 620 70 44 | info@cryotec.ru
www.cryotec.ru